



## HASTA VE BAKICI EĞİTİMİ

# Yanak Sürüntüleri Kullanılarak HLA Numunelerinin Toplanması ve Geri Gönderilmesi için Talimatlar

Bu bilgiler insan lökosit antijeni (HLA) numunelerinin nasıl toplanacağını ve geri gönderileceğini açıklamaktadır.

MSK her donör için 1 HLA test kiti verir. HLA numunelerinizi gönderiyorsanız, donör sizsiniz demektir. Başka birinin numunelerini göndermesine yardımcı oluyorsanız, donör o kişidir.

Her kitte şunlar bulunur:

- 2 paket steril pamuk uçlu eküvyon çubuğu. Her pakette 2 eküvyon çubuğu vardır. Tüm 4 eküvyon çubuğunu kullanın.
- 1 adet steril plastik gönderme tüpü.
- 1 adet donörün yasal adı ve doğum tarihini içeren önceden basılmış etiket.

- 1 adet numune toplama tarihi ve saatini yazmak için boş etiket.
- 1 adet ön ödemeli, dolgulu UPS iade zarfı.

UPS iade zarfınızın gideceği adres önceden şu adres ile belirlenmiş olacaktır:

## **Center for Laboratory Medicine**

**Dikkatine: Müdür Yardımcısı - Specimen Logistics**

**1<sup>st</sup> Floor**

**327 East 64<sup>th</sup> Street**


**New York, NY 10065**

## **HLA numuneleri nasıl toplanır**

HLA numunelerini almadan önce yaklaşık 1 ila 2 saat boyunca bir şey yemeyin veya içmeyin.

1. 2 pamuk uçlu eküvyon çubuğunu kullanarak bir yanağın iç kısmını yaklaşık 10 kez ovalayın. Aynı anda 2 çubuk kullanabilir veya bunları birbiri ardına kullanabilirsiniz.
2. Kalan 2 pamuk uçlu çubuğu kullanarak diğer yanağın iç kısmını yaklaşık 10 kez ovalayın.
3. Sürüntüleri kurumaması için tüpün üzerinde bekletin (bkz. Şekil 1). En az 2 ila 3 saat kurumaya bırakın.

Sürüntüler tüpe koymadan önce tamamen kuru değilse küflenebilirler. Bu meydana gelirse, sürüntüleri test için kullanamayız.

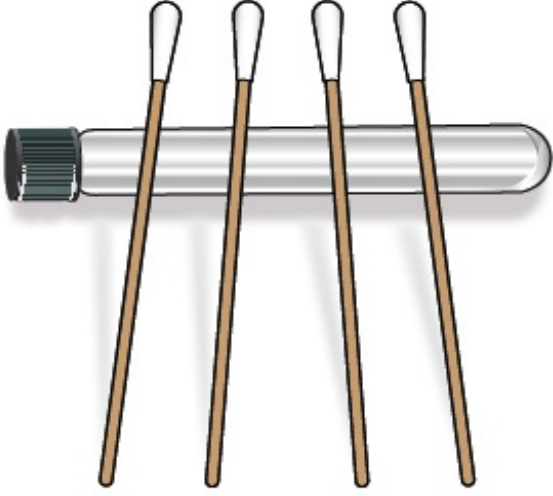


Şekil 1. Test tüpünde kuruyan eküvyon çubukları

## HLA numuneleri nasıl geri gönderilir

1. 4 sürüntüyü de tüpün içine yerleştirin. Tüpü kapatın.
2. Donörün adının ve doğum tarihinin doğru olduğundan emin olmak için önceden basılmış etiketi (bkz. Şekil 2) kontrol edin.

Yanlış bir şey varsa üzerini çiziniz. Etiketin üzerine doğru bilgileri yazın. Açık ve net şekilde yazın.

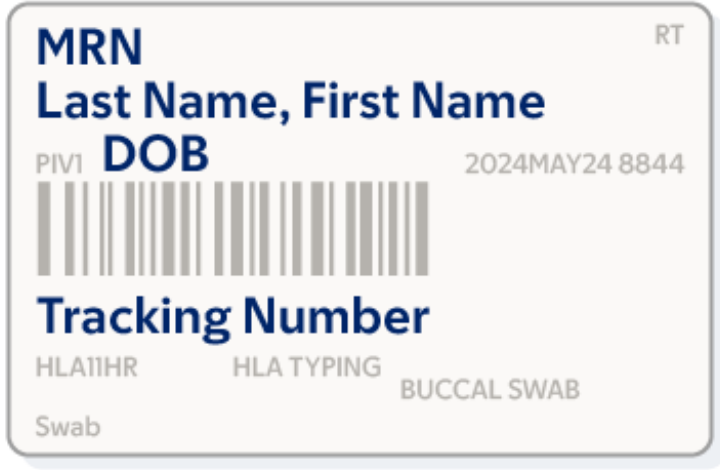


Şekil 2. İsim ve doğum tarihini içeren önceden basılmış etiket

---

3. **Numunenin toplandığı tarih ve saati doğrudan diğer etiketin üzerine yazın** (bkz. Şekil 3). Açık ve net şekilde yazın.

**Numunenin alındığı tarih ve saati yazmazsanız, numunenizin işlenmesi daha uzun sürecektir.**

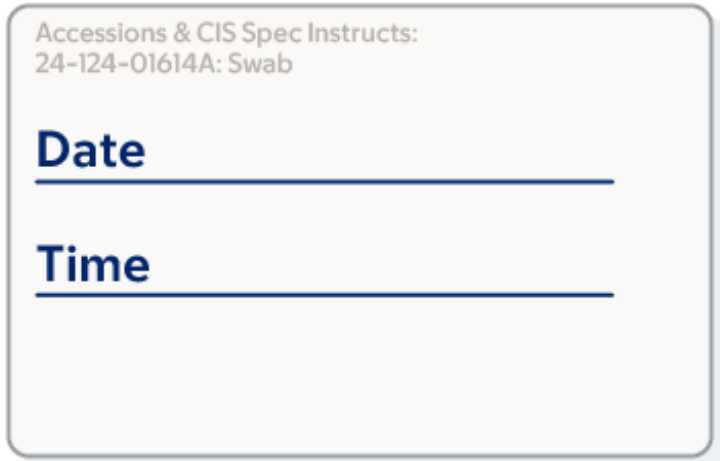

Şekil 3. Tarih ve saati içeren önceden basılmış etiket

---

4. **Her iki etiketi de tpn zerine yapıştırın.** st ste gelmediklerinden emin olun.

**Tpn zerine her iki etiketi de koymazsanız numunenizi işleme alamayız.** Yeni bir tane alıp göndermeniz gerekecektir.

5. Etiketli tp iade zarfının iine koyun. Zarfı kapatın.

6. İade zarfını bir UPS teslim yerine gtrn. Size en yakın olanı bulmak iin [www.ups.com/dropoff](http://www.ups.com/dropoff) adresini ziyaret edin.

İade zarfının kargo etiketinde bir takip numarası bulunacaktır. MSK, bunu paketinizi takip etmek kullanacaktır. Siz de zarfı takip etmek isterseniz, UPS'ye zarfı vermeden nce takip numarasını not edin.

## **Ek bilgiler**

- Zarfa 1'den fazla siyah kapaklı tp koymayın. 1'den fazla donr numune gnderiyorsa, her biri kendi HLA test kitini alacaktır. Her donr, kendi kitinin bulunduėu geri gnderme zarfını kullanarak numunesini geri gndermelidir.
- Tm numuneler MSK tarafından alınmalı ve işlenmelidir.

# **HLA Yanak Sürüntü Numunelerinin Alınması ve Geri Gönderilmesi için Kontrol Listesi**

## **HLA Numunelerinin Alınması**

- Numuneleri almak için bir şeyler yedikten veya içtikten sonra 1-2 saat bekledim.
- Her bir yanakta 2 sürüntü kullandım (her iki yanak için toplam 4 sürüntü).
- Sürüntüleri en az 2 ila 3 saat kurumaya bıraktım.

## **HLA Numunelerinin Geri Gönderilmesi**

- Açıkta kurutulmuş 4 sürüntüyü de tüpe koydum.
- Tüpün üst kısmını sıkıca kapattım.
- Adım ve doğum tarihim önceden basılmış etikette doğru yazıyor. Doğru değilse. Üzerlerini çizdim ve doğru bilgileri yazdım.
- Boş etiketin üzerindeki boşluklara tarih ve saati yazdım.
- Her iki etiketi de tüpün üzerine yapıştırdım.

□ Tüpü ön ödemeli iade zarfına koydum.

□ Zarfı UPS teslimine yerine götürdüm.

Detaylı talimatlar için bkz. *Yanak Sürüntüleri Kullanarak HLA Numunelerinin Toplanması ve Gönderilmesi*

HLA testiniz hasarlıysa, kitinizde eksik malzeme varsa veya sorunuz varsa, lütfen bizi arayın.

- Hasta 18 yaşında veya daha büyükse, 646-608-4134 numaralı telefondan Yetişkin Kök Hücre Nakli İle İlgili Donör Ofisini arayın.
- Hasta 18 yaşından küçükse, 212-639-8478 numaralı telefondan Pediatrik Kök Hücre Nakli İlgili Donör Ofisini arayın.

Sanal kütüphanemizde arama yapmak ve daha fazla kaynak için [www.mskcc.org/pe](http://www.mskcc.org/pe) adresini ziyaret edin.

Instructions for Collecting and Returning HLA Samples Using Cheek Swabs - Last updated on August 30, 2024

Memorial Sloan Kettering Cancer Center, tüm hakların sahibidir ve elinde tutmaktadır.