

患者及照护者教育

如何进行粪便免疫化学检测 (FIT)

本资源介绍了如何进行粪便免疫化学检测 (FIT)。 FIT 是一种用于检查您粪便(大便)中是否有血液的检查。

关于 FIT

FIT 是一种用于检查您粪便(大便)中是否有血液的检查。 有很多原因会导致您的大便中带血。 您的医疗保健提供者将与您讨论您接受检测的具体原因。

为 FIT 做好准备

在 FIT 之前,您不需要避免进食任何食物或服用任何药物。

如果出现以下情况,请勿采集粪便样本进行 FIT:

- 您的检测卡过期、损坏或脏污。 采集粪便样本前,请检查检测卡上的失效日期。
- 您有痔疮(肛门静脉肿胀)出血。
- 您有尿血或在马桶中看到血液。 如果您看到血液,请联系您的医疗保健提供者。
- 您正处于月经期、在过去3天内处于月经期,或马上到月经期。
- 您手上有还在出血的伤口。

洁厕剂或化学品可能会影响您的 FIT 结果。 如果您的马桶或水箱中有此类物品,请将其移出。 然后冲洗马桶 2-3 次。

如何采集粪便样本

将所需用品放在卫生间中您可以轻松触及的位置。 需要用到:

- 检测卡
- 带有2个刷子和1个废物袋的刷子套件

- 样本袋
- 回邮信封
- 标签
- 垃圾桶

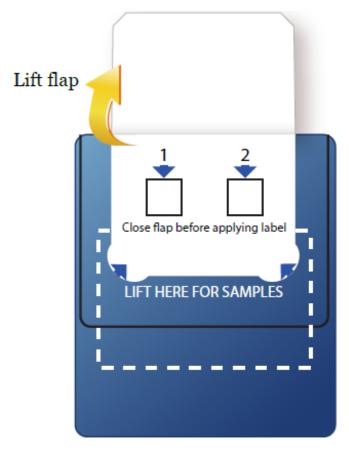


图 1. 打开检测卡上的封口

请按照以下步骤采集您的粪便样本并进行 FIT:

- 1. 采集样本前,请冲洗厕所 2-3 次。
- 2. 如往常一样坐在马桶上进行排便。 排便后请不要冲厕所。
- 3. 打开检测卡前面的封口 您可以看到有 2 个分别标记为 "1"和 "2"的白色正方形(见图 1)。
- 4. 用刷子套件中的一把刷子轻轻擦拭粪便表面(见图 2)。 大约擦拭 5 秒。 如果您的粪便比较松散(稀便),请用刷子搅拌粪便周围的水 5 秒。

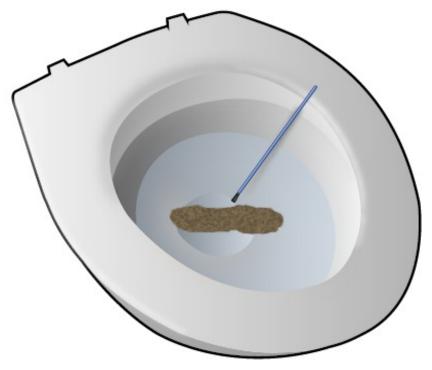


图 2. 擦拭粪便表面

- 5. 从水中取出刷子。 在马桶上轻轻摇晃,以除去多余的水和任何粪便团块。
- 6. 用刷子在检测卡上标记为"1"的正方形内涂抹(见图 3)。 然后将刷子放入废物袋内。

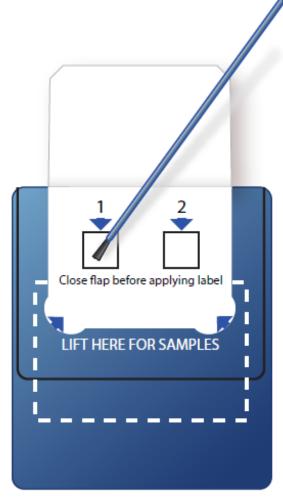


图 3. 用刷子在标记为"1"的正方形内涂抹

- 7. 使用另外一把刷子重复进行第 4 步到第 5 步的操作。 然后,用刷子在检测卡上标记为 "2"的正方形内涂抹。 将刷子放入废物袋内然后丢弃。
- 8. 冲洗马桶。
- 9. 清洗双手。 用温水润湿双手,然后用肥皂揉搓至少 20 秒。 用温热的流动自来水冲洗双手。
- 10. 关上检测卡的封口。检查您的医疗保健提供者给您的标签上的信息是否正确。将标签贴在检测卡上的虚线内,这样封口才不会自动打开。
- 11. 在样本袋的标签上写下采样日期和时间。
- 12. 将检测卡放入样本袋中。 然后将样本袋放入您的医疗保健提供者给您的预付费信封。 邮寄地址已经印在信封上。
- 13. 将信封邮寄出去。

If you have questions or concerns, contact your healthcare provider. A member of your care team will answer Monday through Friday from 9 a.m. to 5 p.m. Outside those hours, you can leave a message or talk with another MSK provider. There is always a doctor or nurse on call. If you're not sure how to reach your healthcare provider, call 212-639-2000.

有关更多资源,请访问 www.mskcc.org/pe,在我们的虚拟图书馆中进行搜索。

How to Do a Fecal Immunochemical Test (FIT) - Last updated on July 24, 2024 Memorial Sloan Kettering Cancer Center 拥有和保留所有权利